


Duo Disk



Imagens Ilustrativas.

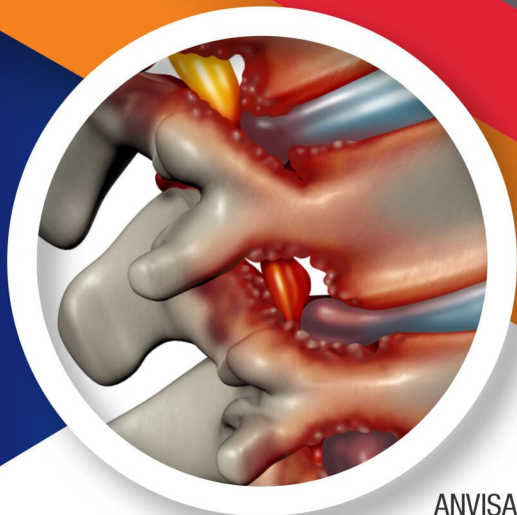

ANVISA: 81512920009

Discectomia Percutânea de Disco

A agulha de corte rotativa especialmente projetada para o nosso sistema de discectomia percutânea, remove o núcleo pulposo que se projeta do disco intervertebral e o aspira para fora do corpo do paciente diminuindo a pressão que é exercida sobre o nervo circundante, para alívio da dor.

Âmbito de aplicação

O Kit Cânula Duo Disk é usado para diminuir a pressão do disco cervical e lombar, para gerenciamento da dor crônica e aguda.


Recursos

Cerca de 2 ml de núcleo pulposo podem ser retirados e aspirados diretamente na cânula e a descompressão pode ser observada logo após o procedimento.

A pequena cabeça de corte rotativa não danifica os anéis fibrosos. O canal de punção fechará automaticamente após a cirurgia, não restando orifícios para extravasamento de núcleo pulposo. Operação fácil, segura e rápida.

O dispositivo delicado, requintado e portátil não precisa de fonte de alimentação externa, com energia suficiente e capacidade de corte rotativo por um longo período.

A câmara coletora armazena fragmentos do disco, que podem ser enviados para biópsia a critério do médico.

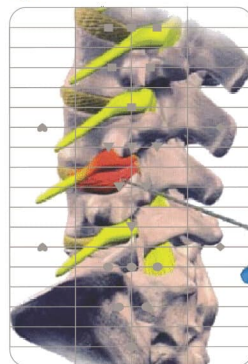

Acompanha posicionador cirúrgico radiopaco

Apresentação

01 disector mecânico que utiliza o princípio do parafuso de Arquimedes 150mm

01 cânula introdutora de 16Gx150mm

01 cânula introdutora de 17Gx150mm

01 posicionador cirúrgico radiopaco para marcação anatômica.

Produto descartável e estéril.

Distribuidor Autorizado


INNOVA
Tecnologia para Saúde

11 **2988-7427**

www.innovatecsaude.com.br

Av. Pres. Kennedy, 3500
Sta. Paula, São Caetano do Sul – SP

 /innova-tecsaude

 /innova.tecsaude

 /innovatecsaude